

آمیکو یسناپارس

شماره ۱۰

خبرنامه پوست و زیبایی / مرداد و شهریور ۱۴۰۱

دستگاههایی که هیچ گاه خاموش نمی‌مانند!

صفحه ۲

قلب‌هایی که برای تندرستی می‌تپند!

صفحه ۲

لوتوس، دستگاه محبوب جوانسازی در دنیا

صفحه ۴

درخشش ستاره‌های هلیوس و لوتوس در سرزمین شعر و بهارنارنج

صفحه ۵

کلینیک کارتون / دستگاه لوتوس III

صفحه ۸

تابستان و راه‌های جدید

می‌دانید چرا هیچ کاری در جهان لذت‌بخش‌تر از سفر نیست؟ چون پا در راهی می‌گذارید که تازه است حتی اگر بارها آن مسیر را طی کرده باشید.

هر بار درختان و آسمان طور دیگری است، رودخانه و حتی صحرا حالتی دیگر دارند.

سفر، تابستان و جوانی از یک جنس هستند، هنوز طعمش را خوب نجشیده‌اید که زود تمام می‌شود، اما همان طعم تو را نمک‌گیر می‌کند و خاطره‌ای ماندگار رقم می‌زند.

اما راه‌های جدید فقط در سفر در انتظار شما نیست! ما نیز در آمیکو یسناپارس راه‌های نوینی را جستجو می‌کنیم تا جهانی از خاطره‌های لذت‌بخش برایتان خلق و ماندگار کنیم.

در این شماره از دستگاهی بیشتر خواهیم گفت که به درستی، صفر تا صد جوانسازی لقب گرفته است.

دستگاه منحصر به فرد لوتوس III، بی‌تردید شایسته آن است که راهی جدید و نوین در حیطه دستگاه‌های لیزر شمرده شود.

این راهی تازه و البته لذت‌بخش است که شرکت آمیکو یسناپارس با افتخار به جامعه محترم پزشکی عرضه کرده است.

دستگاه لوتوس III با عرض پالس‌های منحصر به فرد و گسترده امکان استفاده از ویژگی‌های بی‌نظیری را فراهم کرده است به عنوان مثال از لایه‌برداری محض با کمترین اثر حرارتی (Cold Ablation) تا لایه‌برداری با اثر حرارتی بالا (Hot Ablation) به درستی از دستگاه لوتوس III راهی نوین ساخته است.

اکنون این راه پیش روی شما و آمیکو یسناپارس در این مسیر همراه شماست.



instagram.com/amicoyasnapars

به مناسبت اول شهریور، زادروز ابوعلی سینا،
پزشک و فیلسوف معروف و روز پزشک

قلب‌هایی که برای تندرستی می‌تپند!

بزرگی می‌گفت: هرگاه انسانی را در سختی
کنار خود یافتی به روز عافیت نیز به یاد او باش.
انسان‌های بزرگ را می‌توان در دشواری‌ها و
ناملازمات یافت و شناخت.

در میهن ما، ایران، روز نخست شهر یورماه
هرسال، همزمان با زادروز ابوعلی سینا، به پاس
خدمات وی به علوم پزشکی، تألیفات و فعالیت
وی در این رشته و برای بزرگداشت پزشکان، روز
پزشک نامگذاری شده است.

بی‌تردید گرامیداشت چنین روزی برای
همه ما یادآور تلاش‌ها و یاری‌های جامعه
پزشکی میهن عزیزمان در تندرستی و شادکامی
هممیهن‌انمان است.

شرکت آمیکو یسن‌پارس همواره مفتخر به
خدمت‌رسانی به جامعه محترم پزشکی است و
از همین روی این روز مهم را به ایشان شادباش
گفته و امیدوار است مانند همیشه با ارائه
بهترین و منحصربه‌فردترین محصولات و
خدمات همراه پزشکان ارجمند باشد.

روز پزشک مبارک!



۱- ابوعلی سینا، پزشک و فیلسوف معروف متولد شهر
بخارا است و مدفن او در همدان، یکی از شهرهای تاریخی
ایران است و از مشهورترین و تأثیرگذارترین فیلسوفان
و دانشمندان ایران است که آثارش در زمینه فلسفه
ارسطویی و پزشکی اهمیت بسیار دارد. وی ۴۵۰ کتاب در
زمینه‌های گوناگون نوشته است که یکی از معروف‌ترین
کتاب‌هایش کتاب شفا، دانشنامه علمی و فلسفی جامع
و کتاب قانون یکی از کتابهای معروف ابن سینا در زمینه
علم پزشکی است. وی از کودکی به طبیعت، گیاهان و
حیوانات علاقه خاصی داشت و اوقات فراغت خود را در
دشت و صحرا به جستجو و کسب تجربه می‌پرداخت
بدین صورت از دوران کودکی به خواص گیاهان دارویی و
طبابت علاقه‌مند شد. ابن سینا از حیث نیروی جسمانی،
مردی نیرومند بود و به همین خاطر از کار کردن احساس
خستگی نمی‌کرد، وی همچنین از لحاظ نیروی ذهنی و
تفکر نیز بسیار نیرومند بود، به گونه‌ای که در سن هجده
سالگی توانست تمامی دانش‌های زمان خود را فرا گیرد.

آشنایی با دپارتمان فنی شرکت آمیکویسن‌پارس

دستگاه‌هایی که هیچ‌گاه خاموش نمی‌مانند!

نیروی انسانی باتجربه و پشتیبانی مداوم

در این شماره می‌خواهیم از دپارتمانی سخن بگوییم که از روز نخست، اقدام به راه‌اندازی اش
شده است، دپارتمان فنی، یکی از واحدهای مهم و ارزشمند شرکت است، زیرا ما در شرکت
آمی‌کویسن‌پارس، فروش را تنها مرحله نخست از ایجاد ارتباطی دراز مدت مبتنی بر اعتماد و ارائه
خدمات و پشتیبانی همه‌جانبه به مشتریان می‌دانیم و به همین دلیل این شرکت، استاندارد
Zero Downtime را برای عرضه بهترین خدمات به مشتریان پیاده‌سازی کرده است. براساس این
استاندارد در کنار تیمی کارآزموده و با تجربه از کارشناسان فنی و مهندسان، سرمایه‌گذاری در سطحی
کلان برای تأمین قطعات صورت گرفته تا مشتریان در هیچ برهه زمانی برای دریافت خدمات کامل در
انتظار نمانند.

فراتر آنکه چنانچه علی‌رغم تمامی این تدابیر، سرویس یک دستگاه نیاز به زمان بیشتری داشته باشد ارائه
دستگاه پشتیبان، گام دیگری برای جلوگیری از بروز هرگونه اختلال در مراکز درمانی در جهت پاسخگوئی
به بیماران و مراجعین خواهد بود.

از مزیت‌های واحد فنی شرکت آمیکویسن‌پارس می‌توان به اختصار چنین گفت:


- بهره‌گیری از مهندسین فنی دانش آموخته و باتجربه
- توجه به بروز رسانی مداوم و ارتقای فنی پرسنل از طریق شرکت در دوره‌های آموزشی و ورکشاپ‌های
برگزار شده کمپانی‌های سازنده
- پشتیبانی تلفنی مداوم مشتریان توسط مهندسان واحد فنی
- انجام خدمات فنی و مهندسی و سرویس‌های دوره‌ای ضروری، در کوتاه‌ترین زمان ممکن
- تأمین انواع قطعات اصلی دستگاه، اعم از مصرفی و غیر مصرفی و بهره‌برداری از انبار اختصاصی با
موجودی کافی منطبق با نیازها جهت اطمینان خاطر مشتریان
- ارائه قطعات و دستگاه‌های پشتیبان و جایگزین به مراکز، در مواردی که سرویس دستگاه اصلی
مراکز نیاز به زمان بیشتری دارد، به‌منظور جلوگیری از بروز اختلال در فعالیت مراکز درمانی در
پاسخگویی به مراجعین
- ارائه آموزش‌های فنی به صورت تلفنی یا حضوری، جهت ارتقای دانش نگهداری از دستگاه و
جلوگیری از هرگونه آسیب به دستگاه
- دپارتمان فنی با سرویس‌دهی در کمتر از ۲۴ ساعت (در مراکز تهران) و کمتر از ۷۲ ساعت (در مراکز
شهرستان) در پی عرضه بهترین، سریع‌ترین و با کیفیت‌ترین خدمات است



Exceptional multi-pulse

لوتوس

معجزه‌ای برای صفر تا صد جوانسازی

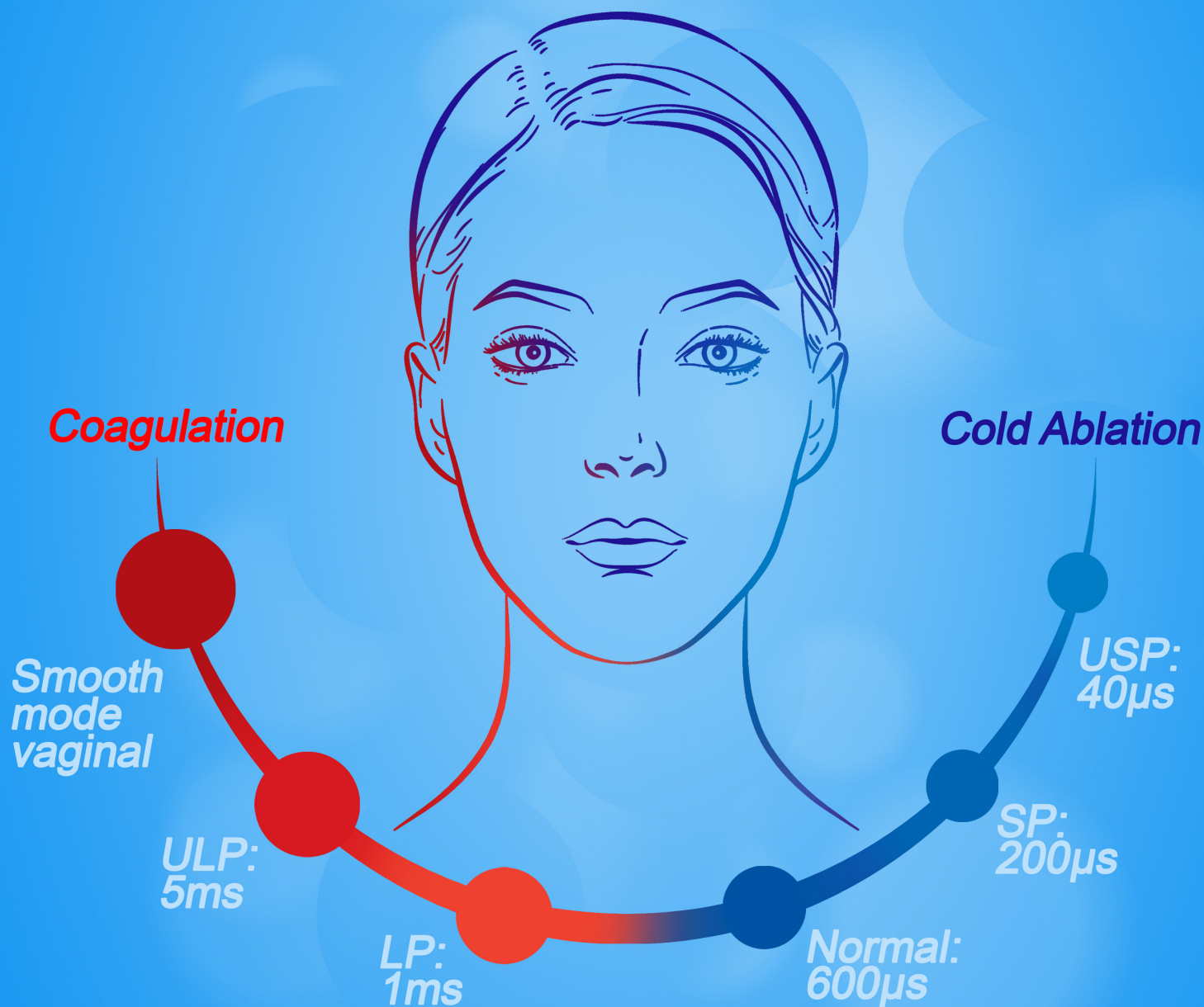

LASEROPTTEK

Amico Yasna Pars (Pr.J.S.Co)

دکتر سعید نورایی متخصص پوست، مو و زیبایی از تجربیات خود با دستگاه لیزر اربیوم یگ فرکشنال لوتوس می‌گویند

دستگاه محبوب جوانسازی در دنیا

در فصول گرم سال که ما محدودیت استفاده از لیزر Co2 فرکشنال را داریم موثرترین طول موج اربیوم یگ با تکنولوژی فرکشنال است که جذب ۱۲ برابری نسبت به طول موج Co2 دارد و بسیار ایمن می‌تواند بدون هیچ محدودیتی درمان را برای مراجعه کننده انجام دهد



آمریکا شده است. با توجه به تجربه شخصی بنده استفاده از این دستگاه می‌تواند بهترین نتایج جوانسازی پوست را به همراه داشته باشد از جمله درمان Fine wrinkle و بهبود Texture پوست به خصوص در فصولی که در استفاده از لیزرهای لایه بردار و جوانساز محدودیت داریم انتخاب اربیوم یگ در درمان جای جوش و درمان میلیا های پوستی و همچنین درمان سیرینگوما و کلا هر نوع ضایعه پوستی که قصد رفع آن بصورت خیلی دقیق را داریم بهترین گزینه است چون نسبت به طول موج های جوانساز دیگر آسیب گرمایی کمتری دارد.

در فصول گرم سال که ما محدودیت استفاده از لیزر Co2 فرکشنال را داریم موثرترین طول موج اربیوم یگ با تکنولوژی فرکشنال است که جذب ۱۲ برابری نسبت به طول موج Co2 دارد و بسیار ایمن می‌تواند بدون هیچ محدودیتی درمان را برای مراجعه کننده انجام دهد.

تجربه فوق العاده‌ی دیگری که دارم درباره درمان استریاها پوست است که نتیجه خیلی خوبی را به جای می‌گذارد که در کنار روش های دیگر می‌توانیم از اربیوم یگ فرکشنال بهره ببریم و طول و عرض استریا را کم کنیم و آن را کوچکتر کنیم همچنین برای درمان اسکارهای آتروفیک و هایپرتروفیک که می‌تواند ناشی از آکنه و یا جراحی باشد با این دستگاه اختصاصی ترین درمان را می‌توانیم داشته باشیم. برای بیماران حساسی که می‌خواهند با دوران نقاهت کمتر و با کاهش عوارض جانبی و همچنین درمان موثرتر به واسطه عمق نفوذ بیشتر اربیوم یگ نسبت به دیگر طول موج های جوانساز کار درمانی خود را توسط پزشک انجام دهند لوتوس بهترین انتخاب است.

دستگاه لیزر فرکشنال لوتوس ساخت یکی از برترین کمپانی های تجهیزات پزشکی، لیزر اپتک است که با بهره گیری از طول موج اربیوم یگ ۲۹۴۰ نانومتر و با قابلیت منحصربه فرد فرکشنال یکی از دستگاه های محبوب جوانسازی در دنیا لقب گرفته است.

این دستگاه با استفاده از تکنولوژی جذاب لایه برداری سرد (Cold Ablation) و با پشتیبانی از فناوری های نوین و با امکان استفاده از مدهای مختلف جز سردمداران دستگاه های اربیوم یگ محسوب می‌شود.

از نکات متمایز کننده این دستگاه می‌توان به امکان تنظیم عرض پالس خروجی در ۶ مد بسیار کاربردی اشاره کرد که محدودیت های موجود در مدل های قبلی لیزرهای اربیوم یگ را از بین برده است. لوتوس نخستین و برترین دستگاه لیزر اربیوم یگ فرکشنال است که قابلیت تنظیم عرض پالس ۴۰ میکروثانیه با عمق نفوذ بالا و با کمترین میزان آسیب گرمایی بدون عوارض جانبی و کمترین میزان درد را به ما می‌دهد.

پالس فوق بلند ۵ میلی ثانیه امکان کواگولیشن با لایه برداری سطحی را به ما می‌دهد. لایه برداری پوست در این حالت بسیار سطحی است و این مد بیشتر برای انعقاد و تحریک گرمایی به کار می‌رود.

تنوع وسیع در مورد مدهای دستگاه باعث می‌شود درمان های اختصاصی تر و نتایج بهتر با دوران نقاهت کوتاهتری را داشته باشیم.

دوام و پایداری و نتایج درمانی فوق العاده این دستگاه منجر به اخذ FDA از سازمان غذا و داروی



Night of the Helios & Lotus Stars

شرکت آمیکویسنا پارس برگزار کرد

درخشش ستاره‌های هلیوس و لوتوس در سرزمین شعر و بهار نارنج

شرکت آمیکویسنا پارس با برگزاری "شب ستاره‌های هلیوس و لوتوس" در تاریخ ۲۶ خرداد ماه ۱۴۰۱ در شهر شیراز از دو دستگاه منحصر به فرد لیزر کیوسوییچ فرکشنال هلیوس III و لیزر اربیوم فرکشنال لوتوس III با حضور ارزشمند اساتید متخصص این شهر زیبا در هتل بزرگ شیراز، رونمایی و به شایستگی معرفی کرد



از آن روی که تکنولوژی جوانسازی 4G دستگاه هلیوس III یکی از برجسته‌ترین و با اهمیت‌ترین توانایی‌های دستگاه در مبحث لیفتینگ، تونینگ و کانتورینگ است، شرکت آمیکویسنا پارس تمام تلاش خود را برای معرفی هرچه بیشتر تکنولوژی جوانسازی 4G دستگاه هلیوس III انجام داد.

سخنرانی و معرفی کارکردهای منحصر به فرد دستگاه

در این مراسم‌ها سخنران جناب آقای دکتر محمد سعیدی که حدود ۱۰ سال به عنوان درماتولوژیست در زمینه درمان‌های مختلف در حال فعالیت هستند و اختصاصاً در این سال‌ها با دستگاه‌های لیزر کیوسوییچ خصوصاً دستگاه هلیوس III کار کرده‌اند، ایشان ابتدای سخنرانی در رابطه با فیزیک دستگاه هلیوس III و کاربردهای درمانی نوین از قبیل جوانسازی 4G کربن پیلینگ و تاتو ریمووال و برطرف کردن لک‌های اییدرمال و درمال، وایتینگ نواحی تیره بدن و... صحبت و در ادامه تجربیات ارزشمند خود را با دستگاه هلیوس III بیان کردند.

کارکرد دستگاه و جلسه پرسش و پاسخ

همچنین فیلم کارکرد جوانسازی 4G دستگاه هلیوس III بر روی یک مراجعه کننده، توسط جناب آقای دکتر محمد سعیدی که در کلینیک شخصی خودشان ضبط شده است برای مهمانان پخش شد.

در شب ستاره‌های هلیوس و لوتوس، پرسش‌های مورد نظر متخصصین مطرح و توسط جناب آقای دکتر محمد سعیدی، توضیحات لازم ارائه گردید.



معرفی دستگاه لوتوس III

لازم به ذکر است که دستگاه لوتوس III به عنوان پدیده‌ای برای صفر تا صد جوانسازی برای جامعه متخصصین معرفی گردید و توانایی‌های منحصر به فرد این دستگاه برای آشنایی بیشتر علاقمندان بیان شد. در پایان مراسم "شب ستاره‌های هلیوس و لوتوس" پذیرایی از مهمانان محترم انجام شد.

هلیوس

تنها لیزر جوانساز با متد 4G

لیفتینگ

کانتورینگ

کلاژن سازی

تونینگ

4G



LASEROPTTEK

Amico Yasna Pars (Pr. J. S. Co)

درمان بیماری Dowling-Degos با لیزر فرکشنال Er:YAG

استاندارد طلایی برای جوانسازی با برترین درمان

این مقاله علمی درباره بیماری پوستی نادر Dowling-Degos است که یک اختلال غیر معمول، خوش خیم و غالب و شامل پیش‌زمینه ژنتیکی است که با رنگدانه‌های مشبک مشخص می‌شود.

نتیجه آزمایشی که بر روی این بیماری و بر روی کیس یک خانم ۴۹ ساله و با تعداد زیادی ماکول کوچک و هایپرپیگمانته انجام شد و نواحی چین‌های صورت، زیر بغل و کشاله ران را با این بیماری بررسی کرد را با هم مطالعه می‌کنیم.

مشاهده می‌کنید بعد از دو جلسه درمانی، بهبود رنگدانه بدون عوارض جانبی دیده شد. لیزر Er:YAG، باعث حذف ناهنجاری‌های بافتی و اپیدرمی و در نهایت منجر به تشکیل بافت اپیدرمی جدید می‌گردد. در طی درمان با این لیزر، بزرگ‌ترین نگرانی‌های پیرپیگمانتاسیون پوستی است که این عارضه جانبی با بهره‌گیری از تکنولوژی فرکشنال به حداقل می‌رسد.

لایه برداری پوست با استفاده از لیزرهای فرسایشی، مانند لیزرهای دی‌اکسید کربن (CO₂) یا Er:YAG، استاندارد طلایی برای جوانسازی پوست را کسب کرده‌اند و در واقع برترین درمان محسوب می‌شوند.

لیزر فرکشنال اربیوم یگ به عنوان یک جایگزین، توسعه داده شد و مورد استقبال متخصصان پوست قرار گرفته است.

با استفاده از این لیزر جوانساز فرکشنال بهبودی بافت زودتر حاصل می‌شود و از التهابات شدید جلوگیری می‌شود، عوارض جانبی کمتری را شاهد خواهیم بود و در نتیجه درمان بسیار مؤثرتری نسبت به دیگر روش‌های جوانسازی ابلیتیو خواهیم داشت.

برای پاکسازی ضایعات پوستی به طور مؤثر نیاز به درمان‌های پیایی دارید، با این حال، براساس ایمنی شناخته شده اربیوم یگ و مشاهده بهره‌وری و نتایج به جای گذاشته این لیزر ما می‌توانیم مطلوب‌ترین برآیند درمانی حرفه‌ای را داشته باشیم.

لیزر فرکشنال Er:YAG می‌تواند یک روش درمانی مؤثر برای درمان این بیماری نادر باشد که در ادامه به توضیحات بیشتر می‌پردازیم. نخستین شرح این بیماری توسط داوولینگ و فرودنتال بوده است و طی این شرح، این بیماری در زنان شایع‌تر از مردان است و معمولاً در دهه چهارم و در بزرگسالی و معمولاً در نواحی زیر بغل، گردن، کشاله ران و برآمدگی‌های اندام ظاهر می‌شود.

همچنین یک مورد بسیار نادر با اسکارهای حفره‌ای اطراف دهان نیز گزارش شده است. برای این بیماری روش‌های درمانی متنوعی امتحان شده اما هیچ روش مشخصی به اندازه درمان با لیزر فرکشنال اربیوم یگ برای رفع ضایعات به طور مؤثر و بدون عوارض جانبی پاسخ‌گو نبود.

برای کاهش درد و ناراحتی بیمار، ۳۰ دقیقه قبل از شروع درمان، کرم لیدوکائین ۵ درصد تجویز شد. در طول درمان دو Pass پالس کوتاه (مدت زمان پالس ۳۵۰/۳۵ میلی ثانیه) و با انرژی ۵۰۰ میلی ژول، در فلوئنس ۱۵/۹۲ J/cm² و فرکانس ۱۰ هرتز و همچنین یک Pass پالس طولانی (در مدت زمان ۱ میلی ثانیه) و با انرژی ۱۰۰۰ میلی ژول، با شار ۳۱/۸۵ J/cm² و فرکانس ۱۰ هرتز اعمال شد.

طی پروتکل درمانی به بیماران توصیه شد که از نور شدید خورشید اجتناب کنند و استفاده از محصولات احیا کننده پوست را در برنامه روزانه خود بگنجانند. همان‌طور که در تصویر



پس از دو جلسه درمانی، بهبود رنگدانه بدون عوارض جانبی دیده شد

کلینیک کارتون!

کیوان وارثی

دستگاه لیزر لوتوس III با لایه برداری محض
با کمترین اثر حرارتی (Cold Ablation) در روزهای گرم تابستان

خانم دکتر؛ روی صورت و گردنم
چقدر خُنکی حس می‌کنم
اول فکر کردم کولر روشنه!

نه عزیزم...
Cold Ablation
دستگاه لیزر
لوتوس III هست

Exceptional multi-pulse
لوتوس III
معجزه‌ای برای صفر تا صد جوانسازی

Coagulation
Cold Ablation
Smooth mode vaginal
ULP: 5ms
LP: 1ms
USP: 40µs
SP: 200µs
Normal: 600µs

FDA CE KFDA
LASEROPTEK
Amico Yasna Pars (Pr. J.S.Co)

آمیکو یسناپارس
خبرنامه پوست و زیبایی / مرداد و شهریور ۱۴۰۱

تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از پل صدر، پلاک ۱۶۹۸، طبقه دوم
تلفن: ۰۲۱-۷۱۱۳۷۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۷۱۱۳۷۳۰۰
www.aypmedical.com info@aypmedical.com

