

شماره ۱۴

آمیگوینا پارس

فروردین و اردیبهشت / ویژه نوروز ۱۴۰۲

خبرنامه پوست و زیبایی

برگ درختان سبز، پیش خداوند هوش
هر ورقی دفترست، معرفت کردگار

وقت بهارست خیز، تا به تماشا رویم
تکیه بر ایام نیست، تا دگر آید بهار

بلبل دستان بخوان، مرغ خوش الحان بدان
طوطی شکرشان، نقل به مجلس بیار

سعدی شیرازی



سرخوش آن نوروز با نفس‌های بهار

زندگی را بهانه‌هایی لازم است و نوروز از آن بهانه‌های شیرین و دلچسب است که آدمی را چون طبیعت دلخوش به بودن و زیستن در کنار یکدیگر می‌کند.
همراه هم بودن و زیستن، معنای زندگی آدمیان را کامل می‌کند و ما مفتخر به کنار شما بودن هستیم و سپاسگزار از توجه ویژه به محصولات منحصر به فرد شرکت آمیکویسناپارس توسط جامعه محترم پزشکی در سالی که گذشت و همراه و پشتیبان شما در سالی که می‌آید.
به پاس این همراهی همچون سالیان پیش، ما در شرکت آمیکویسناپارس، نوروز را با هدیه‌هایی به رسم یادگار آغاز می‌کنیم و بر خود می‌بالیم که در سال پیش رو همراهی ما و شما مستحکم‌تر از پیش خواهد شد.
نوروزتان فرخنده



First Class Laser

Made in USA

ساینالکتور

لیزر موهای زائد

پر قدرت ترین

ایمن ترین

منحصر به من




CYNOSURE®

Amico Yasna Pars (Pr. J. S. Co)

www.cynosure-iran.ir

وقتی جامعه محترم پزشکی با واژه‌های طلایی خود
درباره محصولات درخشان آمیکو یسنا پارس می‌نویسند

تجربه‌های طلایی!

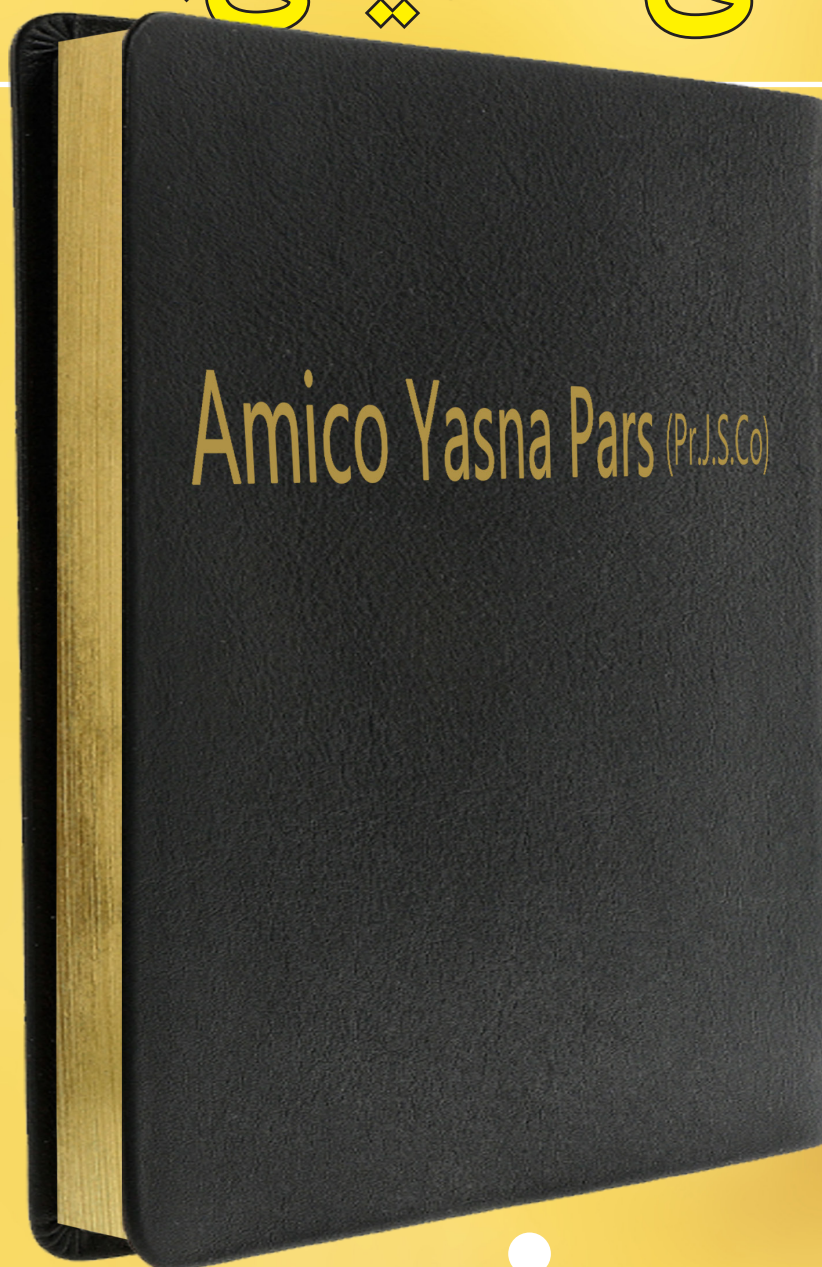

هرگاه به مجموعه‌ای موفق و پیشتاز،
نگاهی دقیق بیندازیم بی‌تردید برنده‌های
روز و معتبر، مشتریان آگاه و متخصص،
پشتیبانی مستمر و... را کنار هم خواهید
یافت. این کنار هم بودن زمانی ماندگارتر
و ارزشمندتر خواهد شد که بتوان آنرا
مستند به تجربیات و نوشته‌های مشتریان
متخصص و باتجربه کرد. ما توانسته‌ایم
این مستندسازی را در شرکت آمیکو یسنا
پارس انجام دهیم و اکنون کتابی ارزشمند
با واژه‌هایی طلایی از جنس تجربه، در
اختیار همه ماست؛ «کتاب طلایی آمیکو
یسنا پارس».

در این کتاب ارزشمند، جامعه محترم
پزشکی از تجربیات خود با دستگاه‌ها،
خدمات و پشتیبانی‌های شرکت
آمیکو یسنا پارس سخن گفته‌اند.
این کتاب مفتخر به حضور نام‌های
ارزشمندی از جامعه محترم پزشکی است
که با تجربه‌های ارزشمندشان، درخشش
کهکشانی از قرن‌ها تجربه است.
نویسنده این کتاب شما همراهان و
مشتریان ارجمند شرکت آمیکو یسنا
پارس هستید و این جایگاه و ارزش
برگه‌های طلایی این کتاب را دو صد
چندان کرده است.

کتاب حاصل تجربه شیرین آشنایی با
محصولات، آموزش، پشتیبانی فنی و
برندینگ شرکت آمیکو یسنا پارس است.



یادداشت ارزشمند جناب آقای دکتر یحیی دولتی
از اساتید پیشکسوت و با تجربه حوزه پوست، مو و زیبایی

ساینا لکتور
CYNO\URE
First Class Laser

بنام خداوند جان و خرد

مدیریت و نظارت بر سرکار دکتر آملوینا پارس، باغبان و تربیت
سال‌ها در رشته است. همواره جزو بهترین سرپرست و همکاران
بوده است. لذا در اینجا از این شرکت تشکر و در راه دارم

دکتر یحیی دولتی
مشخصات: تخصص پوست و مو
تلفن: ۰۲۱-۱۰۷۵۱
مکان: تهران، خیابان ولیعصر

آمیگو یسنا پارس (سهامی خاص)
Amico Yasna Pars (Pr.J.S.Co)

یادداشت ارزشمند جناب آقای دکتر علیرضا فیروز
از اساتید برجسته و با تجربه حوزه پوست، مو و زیبایی

ساینا لکتور
CYNO\URE
First Class Laser

اینجانب سیدین سجاد است که به شرکت آملوینا پارس
و محصولات آن برنده شرکت Cynoure آشنایی دارم.
نام هر دو به معنی درختی است که در بهار و تابستان به بیخ
یا معنی می‌دهد و در میان سیدین سجاد و سیدین اطمینان
بودن خود را ثابت کرده است. امیدوارم این روند کمی مان

دکتر علیرضا فیروز
۱۴۰۱/۰۲/۲۱

آمیگو یسنا پارس (سهامی خاص)
Amico Yasna Pars (Pr.J.S.Co)

یادداشت ارزشمند جناب آقای دکتر امیر هوشنگ احسانی
از اساتید برجسته و با تجربه حوزه پوست، مو و زیبایی

ساینا لکتور
CYNO\URE
First Class Laser

ساعات گذشته که شرکت آملوینا پارس را به نام جلیلی از بنده
خوبی شناسم بهر جهت، نه فقط به جهت آشنایی
هم‌نام بنده که به جهت هم‌نامی با نام خودی
با مدیریت بهر جهت هم‌نام جلیلی
امید دارم که در سالهای آ

دکتر وحید سپهر، متخصص پوست، مو و زیبایی
و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد، از تجربیات
ارزشمند خود با دستگاه الیت پلاس ساینشور می‌گوید:

الیت پلاس در نقش، یک پاک‌کن روی پوست!

کمپانی ساینشور امریکا که در حیطه تجهیزات پزشکی برند و نمونه فعالیت می‌کند بسیار وسیع و با اصالت، با نتایج درمانی فوق‌العاده کمپانی سازنده دستگاه لیزر الیت پلاس است که امروز درباره آن بیشتر صحبت می‌کنیم.

بی‌شک یکی از برترین شرکت‌هایی که با مدیریت بسیار قوی و حرفه‌ای در این زمینه فعالیت می‌کند شرکت آمیکو یسناپارس است که واردکننده انحصاری برند ساینشور امریکا در ایران است و یکی از برترین دستگاه‌های این کمپانی از نظر پزشکان و متخصصین دستگاه الیت پلاس با کاربردهای درمانی متفاوت است.

دستگاه دو طول موج الکساندرایت ۷۵۵ نانومتر و ان‌دی‌یگ ۱۰۶۴ نانومتر را دارد که می‌تواند درمان‌های جوانسازی، از بین بردن ضایعات پیگمانته پوستی، از بین بردن ضایعات عروقی در نواحی مختلف بدن و همچنین رفع موهای زائد اعم از موهای ضخیم، معمولی و یا نازک را به خوبی برای مراجعه‌کننده انجام دهد.

این درمان‌ها باید زیر نظر متخصص پوست انجام شود تا از عوارض جانبی احتمالی مثل سوختگی جلوگیری شود.

از دیگر کاربردهای اختصاصی دستگاه با طول موج الکساندرایت رفع ضایعات تیره و پیگمانته پوستی مثل لنتیگو، کک و مک و در بعضی موارد درمان خال‌های جانکشال و خال‌های سطحی را می‌توان برشمرد.

بهترین درمان برای رفع مو زائد در افراد تیره پوست درمان با طول موج ان‌دی‌یگ این دستگاه است همچنین ضایعات عروقی مثل تلانژکتازیا و عروق سطحی روی صورت و اطراف بینی و رگ‌های عنکبوتی و ضایعات وریدی با هندپیس‌های کوچک و درمانی این دستگاه قابل درمان است.

جوانسازی با طول موج ان‌دی‌یگ و گرمایی

دستگاه الیت پلاس می‌تواند درمان‌های جوانسازی، از بین بردن ضایعات پیگمانته پوستی، از بین بردن ضایعات عروقی در نواحی مختلف بدن و همچنین رفع موهای زائد اعم از موهای ضخیم، معمولی و یا نازک را به خوبی برای مراجعه‌کننده انجام دهد



هستم و بسیار از آن استفاده می‌کنیم. درمان‌های ترکیبی بهترین نتایج را به جای می‌گذارند! درمان ترکیبی که من انجام می‌دهم با طول موج‌های جوانسازی تهاجمی و تخریبی مثل CO2 و اربیوم

معجزه جوانسازی
با دستگاه الیت پلاس
کمپانی ساینشور

پیروزی بر زمان!

دستگاه الیت پلاس ساینشور آمریکا به واسطه پشتیبانی از طول موج ان دی یگ ۱۰۶۴ نانومتر می تواند در ناحیه عمیق پوستی تحریک گرمایی ایجاد کند و جوانسازی و سفت سازی پوست اتفاق بیفتد. این مقاله صحت این گفته را تایید می کند.

● ● ●

ضمن ارزیابی درمان پنج بیمار با استفاده از پروتکل گرمایش عمیق، بیماران و پزشکان حاضر بر درمان، بهبود خطوط ریز چین و چروک و بهبود ظاهر کلی پوست بیماران را با نتایج بسیار خوب شاهد بودند. بیماران درمان با این روش را به خوبی تحمل کردند و از نتایج بر صورت خود بسیار راضی بودند.

درمان لیزر صورت با ان دی یگ بدون دوران نقاهت بوده و بر اثرات پیری پوست تاثیر بسزایی می گذارد.

پروتکل LaserFacial Multi-pass با feathering به این صورت اعمال شد: درمان شامل ۳ الی ۵ جلسه و در طول ۳ الی ۶ هفته بوده است.

فواصل زمانی با استفاده از لیزر Elite+ روی طول موج ۱۰۶۴ نانومتر تنظیم شده است. اسپات سایز ۵ میلی متر، مدت زمان پالس ۰/۴ میلی ثانیه، انرژی ۱۳ الی ۱۸ میلی ژول بر سانتی متر مربع، با پالس هایی که میزان تکرار آن ۵ هرتز بود.

مکانیسم اثر درمانی این لیزر به نظر می رسد ترکیبی از انعقاد عروقی همراه با گرم شدن عمومی درم که باعث تحریک سنتز کلاژن و بازسازی بافت می شود، باشد.

دو روش برای Nd:YAG LaserFACIAL مورد استفاده قرار گرفته است.

تکنیک پره های چند پاسی و پروتکل گرمایش عمیق

تکنیک چند پاس برای قرمزی و عیوب سطحی صورت طراحی شده است این



▲ قبل از درمان لیزر صورت (تصویر بالا) و بعد از سه جلسه درمان (تصویر پایین)، با بهبود بافت پوست

ارزیابی درمان پنج بیمار نشان می دهد که با استفاده از پروتکل گرمایش عمیق، بیماران و پزشکان حاضر بر درمان بهبود خطوط ریز چین و چروک و بهبود ظاهر کلی پوست بیماران را با نتایج بسیار خوب شاهد بودند

تکنیک با گرمایش ناحیه را به سمت تونینگ می برد.

جوانسازی غیرتهاجمی با لیزر Nd:YAG عمق این طول موج بهره می برد و با نفوذ زیاد، برای رساندن انرژی لیزر به عمق بافت و همچنین بدون جذب اپیدرمی قابل توجه صورت

ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی بانسیم
ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب
ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار
گر نکوبی شیشه غم را به سنگ
هفت رنگش می شود هفتاد رنگ

فریدون مشیری



تهران، خیابان شریعتی، پایین تر از پل صدر، پلاک ۱۶۹۸، طبقه دوم
تلفن: ۰۲۱-۷۱۱۳۷۰۰۰ فکس: ۰۲۱-۷۱۱۳۷۳۰۰

info@aypmedical.com

آمیگو یسنایارس

خبرنامه پوست و زیبایی / شماره چهاردهم، فروردین و اردیبهشت ۱۴۰۲



aparat.com/amicoyasnapars



vipdermacustomersportal.ir



aypmedical.com